

Luna分析天平拥有一系列的功能和特征，满足了大多数实验室应用。Luna系列提供了更高的性能，速度更快，读数更精确。凭借现代化的时尚设计，Luna令人印象深刻，彰显出一种智慧和成熟。LCD的大液晶显示屏，让黑色背景上的24mm高的白色字体清晰可辨。多语言文本和显示功能使Luna非常适合不同地区的用户。为了操作方便，导向按钮是彩色编码的，用户只要通过简单培训就能操作各种功能。Luna提供了USB和RS-232两种接口，方便数据收集，及传输到电脑和打印机。ABS塑料外壳和坚固的304级不锈钢秤盘，使Luna在经受大意操作后便于清洁。精度为0.0001g的天平，Luna提供了四种型号，量程最高达250g，可以进行基本的、详细的测量任务。

## 性能和外观，带给人印象深刻的称重体验!



### 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 有多种语言选择
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 配有电源适配器

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 检测称重
- 净总称重

### 关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

## 产品详情

型号	LAB 84e	LAB 124e	LAB 214e	LAB 254e	LAB 84i	LAB 124i	LAB 214i	LAB 254i
量程	80g	120g	210g	250g	80g	120g	210g	250g
精度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
重复性 (S.D.)	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
线性误差	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0003g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0003g
最小称重	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
秤盘大小	80mm $\phi$							
称量单位	mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位							
稳定时间 (秒)	2							
接口	RS-232 / USB							
校准	外部校准				内部全自动校准 / 外部校准			
显示	背光LCD 24mm数高液晶显示							
电源	18VDC 50/60Hz 830mA 适配器							
工作温度	15° 到 35°C							
外壳	ABS 塑料							
防风罩尺寸	192x195x230mm							
整体尺寸	224x374x338mm (宽x深x高)							
净重量	5.8kg				6.2kg			

### 配件

物料编号	说明
104008036	AVT减震工作台
3012014259	防护罩
1120011156	ATP打印机
3014011014	RS-232转PC数据线
700100046	安全锁
600002028	AdamDU-数据采集软件
3074010267	USB数据线
700660290	检定证书
1120014641	AIP高速点阵打印机
700100410	ABI-1,离子发生器
700100207	E2 1g - 200g 校准砝码组
700100022	E2 100g 校准砝码
700100023	E2 200g 校准砝码
700100232	E2 50g 校准砝码
700100026	E2 1mg - 200g 校准砝码组
1060015357	密度测量仪, 0.1mg/mg通用


### 主要配件



**AIP高速点阵打印机**  
AIP高速点阵打印机使用方便，可以连接任何有RS-232或者USB接口的设备。由于AIP能自动检测秤的设置，所以通信非常的顺畅、快速。AIP外壳是耐用的ABS塑料外壳，操作简单，只需使用一个on/off开关和一个进纸按钮。



**ATP打印机**  
结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。

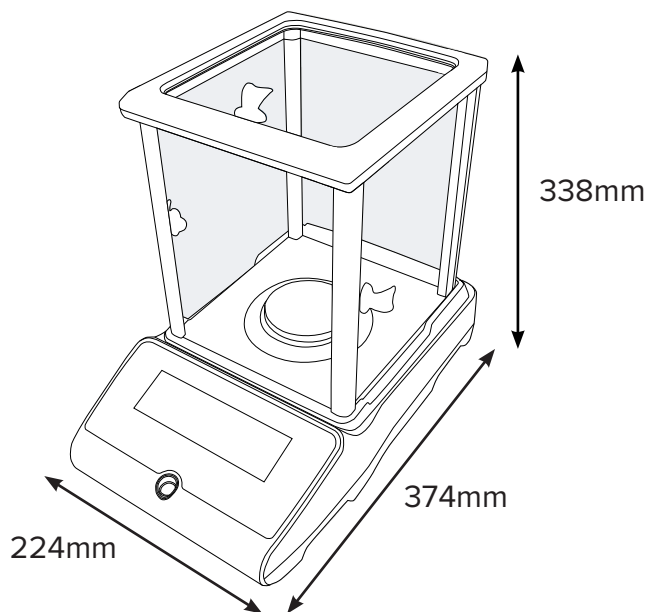

由提供