




Les balances de précision à grand plateau Luna LBL allient robustesse et précision ultime, avec une précision de lecture de 0,1 g et des capacités allant jusqu'à 34 kg. La connectivité et le transfert de données sont simples, via les interfaces Ethernet ou RS-232. Les balances LBL sont construites en une seule pièce et sont compactes. Elles occupent un minimum d'espace sur la table et offrent un niveau élevé de performance et de stabilité. L'écran LCD cristallin affiche de grands chiffres de 24 mm visibles dans presque toutes les conditions d'éclairage.

Pesée de précision avec la capacité d'un balance de table à grand plateau

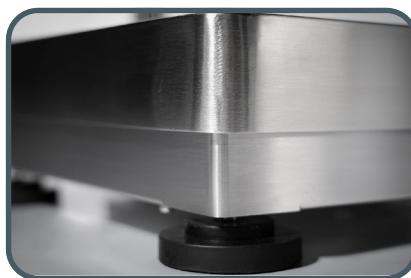

Caractéristiques

- Base de pesée très résistante et grand écran d'affichage cristallin du poids
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Envoi des données de poids à des imprimantes et à des PC via RS-232 ou USB
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Connexion à un réseau à l'aide de l'interface Ethernet RJ45
- Le crochet optionnel permet le pesage sous la balance
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Lockdown device to secure balance
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Batterie rechargeable en option pour une utilisation presque partout
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Adaptateur secteur inclus
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage total net

À Propos d'Adam Equipment:

Depuis plus de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit

Modèle	LBL 14001e	LBL 14001P	LBL 24001e	LBL 24001P	LBL 34001e	LBL 34001P
Capacité	14kg		24kg		34kg	
Précision			0.1g			
Précision - reproductibilité > 80 %			0.1g			
Écart type <5 % Capacité	0.04g			0.03g		
Poids minimum USP (K=2, U=0.10%)	71g		59.6g		55g	
Poids minimum optimisé USP (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d)			82g			
Poids minimum (K=2, U=1%)	7.1g		6g		5.5g	
Taille du plateau			400x300mm			
Unités de pesage			g, kg, lb, oz, lb:oz, ct, GN, N, T, unité personnalisable			
Résolution			1:140000			
Interface			RS-232, USB, Ethernet RJ45			
Calibrage			External			
Affichage			LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm de haut			
Alimentation			Adaptateur 18VDC 830mA			
Température d'utilisation			15° à 35°C			
Boîtier			Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux et plateau en acier inoxydable			
Dimensions totale	470 x 400 x 100mm	335 x 401 x 590mm	470 x 400 x 100mm	335 x 401 x 590mm	470 x 400 x 100mm	335 x 401 x 590mm

Accessoires

Numéro d'article..... Description

- 104008036..... Table Anti-Vibration
- 3012014259..... Coque en Plastique
- 3014011014..... Câble RS-232
- 1120014641..... Imprimante à Impact AIP
- 3126014659..... Papier pour imprimante AIP
- 3126014660..... Papier pour imprimante AIP (x10)
- 1120015779..... Imprimante Thermique ATP2
- 600002028..... Programme de Collecte de Données AdamDU
- 3021210953..... Crochet de Pesage
- 700660290..... Certificat de Calibrage Usine

Accessoires Principaux



Table Anti-Vibration

Conçue de manière ergonomique, la TAV fournit une surface solide et stable développée spécifiquement pour réduire les vibrations lors des mesures.



Programme de Collecte de Données AdamDU

Le logiciel Adam DU (data utility) vous permet de facilement saisir des données des balances Adam Equipment pour analyse immédiate ou export aux autres applications. Gardez un contrôle ferme des opérations de pesage et intégrez des taches de pesages dans des processus avec ce collecteur de données exhaustif.

Fourni par:

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis.
Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.