


Solis分析天平拥有高清晰显示屏，外形直观，为各种实验室应用提供完美的解决方案。Solis多才多艺且品质坚韧，是对数据结果的精确度有非常高要求的科研和质检实验室、科学教学、精确计数、生产制作等应用的理想选择。Solis的键盘上有简单易读的按钮和导向箭头，使用方便，操作简单。

高清晰度，高精度度。

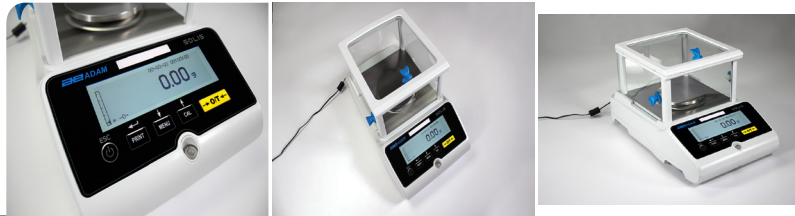

功能

- 高分辨率显示器清晰显示数据
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大称盘方便清洁
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 安全密码控制功能可以防止未经授权的访问
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范
- 有多种语言选择
- 自动累计所有结果
- 检测称重带有声光报警
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 配有电源适配器

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 密度称量
- 峰值锁定

关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

产品详情

型号	SPB 363e	SPB 723e	STB 3202e	STB 6202e	STB 8202e	SPB 363i	SPB 723i	SPB 1203i	SPB 2103i	STB 3202i	STB 6202i
量程	360g	720g	3200g	6200g	8200g	360g	720g	1200g	2100g	3200g	6200g
精度	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g
重复性 (S.D.)	0.0005g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.0005g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g
线性误差	0.002g	0.002g	0.03g	0.03g	0.03g	0.002g	0.002g	0.003g	0.003g	0.03g	0.03g
最小称重	0.02g	0.02g	0.5g	20g	40g	0.02g	0.02g	0.02g	0.1g	0.5g	20g
秤盘大小	110mm ϕ		185x185mm			110mm ϕ			185x185mm		
称量单位	g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tL.H, tL.S, tL.T, 自定义单位										
稳定的时间 (秒)	2	2	3	3	4	2	2	3	3	3	3
接口	RS-232										
校准	外部校准					内部全自动校准					
显示	图形显示与 15mm 液晶										
电源	9VDC 50/60Hz 1A 适配器	24V 50/60Hz 500mA 适配器	9VDC 50/60Hz 1A 适配器	24V 50/60Hz 500mA 适配器		9VDC 50/60Hz 1A 适配器	24V 50/60Hz 500mA 适配器			9VDC 50/60Hz 1A 适配器	24V 50/60Hz 500mA 适配器
工作温度	10° 到 30°C										
外壳	ABS 塑料										
防风罩尺寸	称量室 192x195x115mm		无			称量室 192x195x115mm			无		
整体尺寸	192x195x115mm		224x374x95mm			224x374x- 219mm		224x374x- 219mm	224x374x- 219mm	224x374x- 95mm	224x374x- 95mm
净重量	6.4kg					6.7kg					


配件

物料编号	说明
1060014262.....	秤盘直径80mm对应型号的密度测量仪
3012014260.....	防护罩
3126011263.....	ATP热敏打印纸
3126011281.....	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156.....	ATP打印机
3014011014.....	RS-232转PC数据线
700100046.....	安全锁
600002028.....	AdamDU-数据采集软件
700660290.....	检定证书
1120014641.....	AIP针式打印机
700100008.....	F1 500g 校准砝码
700100007.....	F1 100g 校准砝码
700100009.....	F1 1kg 校准砝码
700100012.....	F1 200g 校准砝码
700100010.....	F1 2kg 校准砝码

主要配件



ATP打印机
结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。

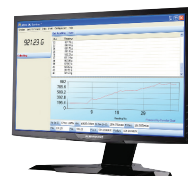

AdamDU-数据采集软件
软件将天平连接到实验室网络，帮助获得无缝的数据收集、传输和分析。DU带有一个主要命令窗口的易于使用的界面，使用户能通过RS-232或USB连接且最多一次同时快速地收集8台Adam天平的信息。

由提供